



**LPW**

**GÜZELLİK EKİPMANLARI**

[www.laserproworld.com](http://www.laserproworld.com)



İÇİNDEKİLER  
İÇİNDEKİLER  
İÇİNDEKİLER  
İÇİNDEKİLER  
İÇİNDEKİLER  
İÇİNDEKİLER

**1** HAKKIMIZDA

**2** NEDEN BİZ?

**3** MİSYON- VİZYON -DEĞERLER

**4** CİHAZLAR

**5-13** ZAYIFLAMA CİHAZLARI

**14-21** LAZER EPİLASYON CİHAZLARI

**22-24** İĞNELİ-İĞNESİZ MEZOTERAPİ CİHAZLARI

**25-27** HIFU CİHAZLARI

**28-42** CİLT BAKIM CİHAZLARI



# HAKKIMIZDA

## LASERPRO WORLD

Ülkemize her geçen gün daha fazla katkı sağlamak, her geçen gün daha fazla istihdam için çalışmaktayız. Şartlar ne kadar zor olursa biz her zaman en iyisi için çalışacağız ve en iyisini yapacağız. Türkiyedeki ve Dünyadaki başarımızın en büyük payını yaptığımız yerli üretime borçluyuz. Her geçen gün yaptığımız Ar-Ge çalışmalarısıyla ürünlerimizi daha da geliştirerek Yerli ve Milli üretime katkı sağlamaktan onur duyuyoruz. Sağlıklı bir yaşam için hizmet vermekteyiz. Bu amaç doğrultusunda, tıbbi hizmetleri gurubun her noktasında en yüksek kalitede, kanıta dayalı ve standart olarak sunmayı hedefliyoruz.

**LASERPRO WORLD ürün yelpazesindeki bütün cihazların yedek parçalarını temin etmekte ve teknik servis hizmetlerini yerine getirmektedir.**



# LASERPRO WORLD

## NEDEN BİZ?

*Farklılığımızı yaratan en önemli unsur, mesleğinde en iyi olmak için gereken eğitim, deneyim ve hizmettir.*

Hedefe ulaşmak için çizdiğimiz rotada; Müşteri beklentilerini, Ulusal ve uluslararası standartları, Yasal mevzuat şartlarını, Geleceğe temiz bir dünya bırakmayı taahhüt ederiz. Müşterilerimize talep ettiği miktarda, LaserPro World kalitesinde ve doğru zamanda ürün iletmeyen doğru iletişimle gerçekleşeceğine inanırız. Ürün kalitemizi korumak ve yükseltmek için çalışmalarımızı doğru iletişimle planlarız.

### Bizimle İletişim Kurun

Kartaltepe Mah. Özbey Sok. NO:1  
Küçükçekmece / İstanbul

**Tel:** (0212) 803 6303

**E-mail:** info@laserproworld.com

**Web:** www.laserproworld.com



## MİSYON

» Tüketici istek ve ihtiyaçlarına özel olarak, bilime dayalı yenilikler yoluyla Ar-Ge Merkezimizde geliştirdiğimiz sağlık ürünlerini; en yüksek teknoloji ve dünya standartlarında üretim kalitesiyle birleştirerek ulusal ve uluslararası regülasyonlar kapsamında insanlığın kullanımına sunmak ve bu yolla yaşam kalitesini yükseltmektir.




## VİZYON

» Medikal ürünler alanında, global arenada birinci ligde rekabet eden lider Türk üreticisi olmak.

» Marka değeri olan, yenilikçi ve güvenilir sağlık ürünlerini dünyanın dört bir köşesine ulaştırarak insanlığa fayda sağlamak.

» Bilime dayalı yenilikleri takip ederek Ar-Ge merkezimizde geliştirdiğimiz özel ürünlerimiz ile; yenilikçi, inovatif ve teknolojik gelişmelere önderlik etmek.

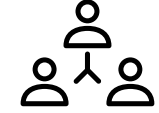

## DEĞERLER

» İnsan sağlığını tüm değerlerin üzerinde tutarak ürün ve hizmetlerimizin her aşamasında insan odaklı olmak.

» Kalite bilincini ürün ve hizmetlerimizin her alanında benimsemiş, dürüst, tüm paydaşlarımıza karşı güvenilir ve şeffaf olmak.

» İçinde yaşadığımız ve çalıştığımız topluma ve tüm dünyaya karşı sorumluluklarımızın bilincinde olarak çevreyi ve doğal kaynakları korumak.

LASERPRO  
WORLD

# CİHAZLAR



LPW

GÜZELLİK EKİPMANLARI

# ZAYIFLAMA CİHAZLARI





# 360 ANGLE CRYOLIPOLYSIS CAVITATION + RF + LIPO LASER

## UYGULAMA

Vücut zayıflatma, Kilo Kaybı, Cildi sıkılaştırma işlemi.

## Teknik özellik

10'4 inc renkli dokunmatik ekran  
CRYO kolları 5 adet:360 açılı CRYO  
Kavitasyon frekansı:40 KHz  
RF frekansı:5MHz, çok kutuplu rf  
Lipo lazer:6 büyük, 2 küçük  
Vakum:650 mmHg  
Pompa akış hızı: 60L/dak  
Vakum basıncı: 0-106Kpa  
Donma sıcaklığı:-10~45 °C  
Voltaj : 220V/50Hz veya 110V/50Hz  
G.W:60kg



# EMS SLİM CİHAZI 4 BAŞLIKLIL

## UYGULAMA

EMSlim, elektirikli kas stimülatör uygulamalarının en gelişmiş örneğidir. Kusursuz çalışan elektromanyetik dalgalar deriden ve yağ dokudan geçip kas kütlesine ulaşır. Yoğun ve sürekli kasılmalarla, uygulama yapılan bölgedeki kas grubu etkili bir şekilde uyarılır.

## Teknik özellik

10.4 inc dokunmatik ekran  
Güç:2000W/4000W  
Güç Tüketimi:2.3KVA  
Çıkış Yoğunluğu:0-7 Tesla  
Stimilasyon Darbesinin şekli:HI-EMT  
Kulplar : 2 kulp/ 4 kulp  
Voltaj: 220V/50Hz veya 110V/50Hz

Şeftali Kalça Boyun Hattı, Güzel bacaklar ve kol hatları  
Yağda %19 azalma, Kasta %16 artış.



# MAGIC SLIM

## UYGULAMA

MAGIC SLIM, yüksek frekanslı ses dalgaları (ultrasound) ve vibrasyon özelliği ile uygulanan bölgede yağ dokusunu parçalar. Kesin ve yeni teknolojik bir metottur. İlk seansta bile büyük fark yaratır.

## Teknik özellik

Tip: AYAKLI

Hedef Alan: Bölgesel zayıflama

Kullanım Alanı: Vücut, kol ve bacaklar

Başlık Sayısı: 6

Ekran: 10.4 İnç Dokunmatik Ekran

Frekans: 80Khz

Giriş: 110-220 V



6 BAŞLIKLI

ULTRA SOUND  
TEKNOLOJİSİ

ÇÜNKÜ;  
SINIFININ EN İYİSİ





**SOĞUK LİPOLİZ**  
**TEKNOLOJİ**  
**İLE AĞRISIZ, ACISIZ**  
**SIKILAŞMA**

# CRYO "SOĞUK" LİPOLİZ CİHAZI

## UYGULAMA

Yağlardaki triglyceridler düşük ısıda katı hale dönüştürülür. Hedeflenen yağ parçaları için gelişmiş soğutma teknolojisi kullanılır. Bu hassas soğutmaya maruz kalan yağ tabakasının kalınlığı, çevre dokulara zarar verilmeden kademeli olarak incelir.

## Teknik özellik

AC 110 V/220V 50-60 Hz Güç: 800VA  
Ekran: 10 inç, renkli, dokunmatik  
Soğutma: -13, -5°C Basınç: 0-100 Kpa-  
Soğutma Suyu: Saf Su  
Zaman: 0-120 dak.  
Sigorta: F2AL250V Çalışma  
Sıcaklığı: 5°C – +40 °C  
Atmosferik Basınç: 80Kpa – 106Kpa-  
Paket Ebadı: 60 x 57 x 138


# LENF DRENAJ

## UYGULAMA

Lenfatik sisteminiz vücudunuzun atıklarını ortadan kaldırmaya yardımcı olur. Sağlıklı, aktif bir lenf sistemi bunu yapmak için düz kas dokusunun doğal hareketlerini kullanır.

## Teknik özellik

Lenf drenaj (Detox)  
Vücut şekillendirme, toparlama  
Zayıflama tedavisi  
Masaj  
Selülit tedavi  
8 çıkışlı, 5 tulum, 16 airbag  
Silikon hortum  
LCD ekran  
Sessiz çalışma özelliği  
Dijital kullanım  
Voltaj: 220 V  
Frekans: 50 Hz  
Power: 70 W  
Amper: 5 A

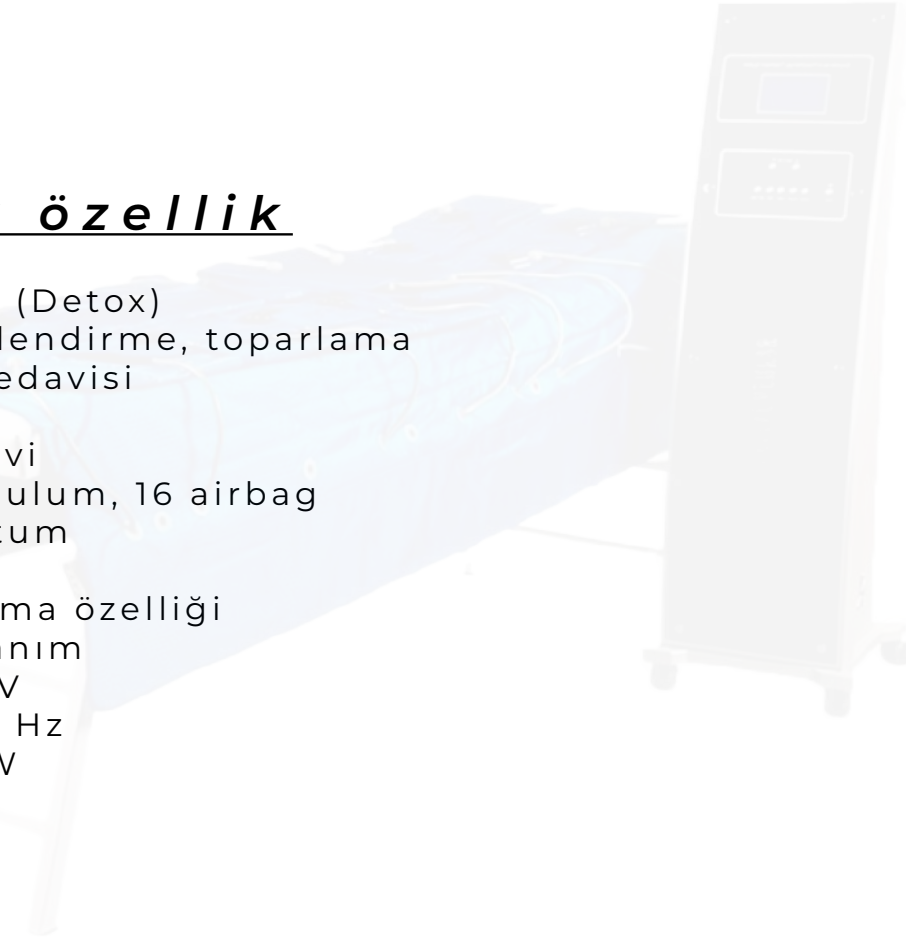

# QSLİM ZAYIFLAMA CİHAZI




## UYGULAMA

Q SLİM, yüksek frekanslı ses dalgaları (ultrasound) ve vibrasyon özelliği ile uygulanan bölgede yağ dokusunu parçalar. Kesin ve yeni teknolojik bir metottur. İlk seansta bile büyük fark yaratır.



## Teknik özellik

Tip: AYAKLI  
Hedef Alan: Bölgesel zayıflama  
Kullanım Alanı: Vücut, kol ve bacaklar  
Başlık Sayısı: 2  
Ekran: 10.4 İnç Dokunmatik Ekran  
Frekans: 80Khz  
Giriş: 110-220 V

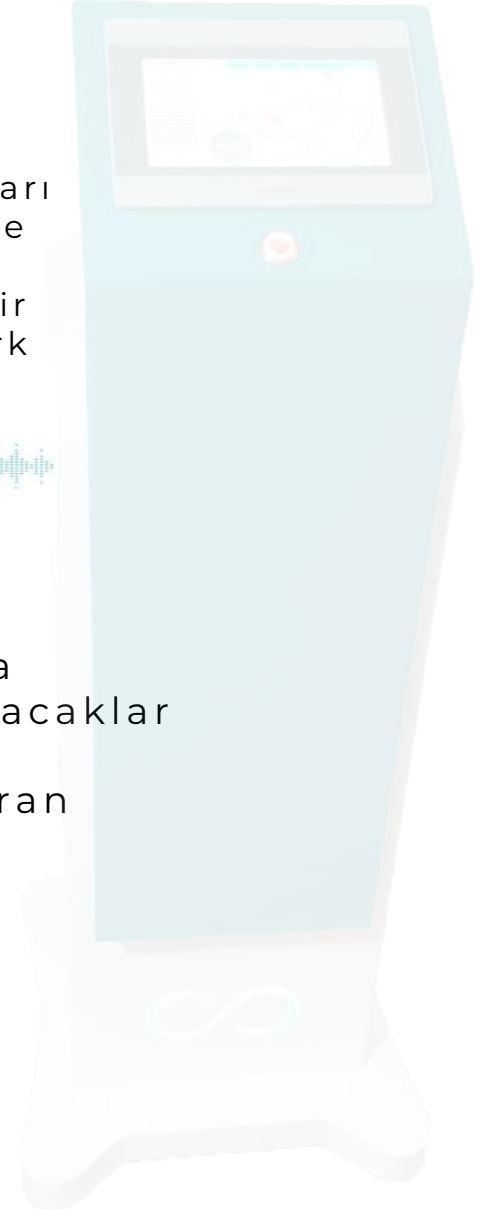

# G5 - MASAJ - SELÜLİT CİHAZI

## UYGULAMA

G5 masajı, ritmik bir masaj aleti olan özel bir cihaz yardımıyla uygulanır. Hızlı titreşimler aracılığı ile sıkılaştırma sağlayan cihaz, selülit tedavisinde oldukça etkilidir. Özellikle selülit tedavisi ve bölgesel zayıflamada kullanılan G5 uygulaması, kaslarda biriken laktik asit ve ödemin atılmasını da sağlar.

## Teknik özellik

Voltaj: 220V  
Frekans: 50Hz  
Power: 2000W  
Amper: 10A  
Motor: 1950dd

*İterek ve sıkıştırma yöntemi ile selülitli bölgelerin portakal kabuğu görüntüsünden gözle görülür azalma sağlayan G5 masajı aynı zamanda bölgesel zayıflamada uygun cihazlar ile kullanıldığında bölgesel zayıflama etkisini artırmaktadır.*

6 BAŞLIKLIL





# PASİF JİMNASTİK CİHAZI

## UYGULAMA

Pasif jimnastik, cildinizin sıkılığını geri kazanmak ve vücudunuzun şeklini iyileştirmek için etkili bir yöntemdir. Bu tedavi lokalize yağ dokusunu, selülit ve sarkıklığı azaltır. Yüz dokusunu da gençleştirebilir.

## Teknik özellik

- 20 Vücut Pedi
- 4 Yüz Pedi
- 2 Göğüs Kalça Pedi
- 10 Boy Bağlama Bandı
- 4 Programlı
- 10 Çıkışlı
- 10 Kademeli
- Bölgesel Çalışma İmkânı
- Vücut Şekillendirme
- Toparlama
- Sıkılaştırma



**PASİF JİMNASTİK İLE  
YAĞLARINIZDAN  
KURTULMAK ÇOK BASİT!**

# EPİLASYON CİHAZLARI



# DIODE LASER 1600WATT

## UYGULAMA

Tüm cilt tiplerine uygun Hızlı ve Kalıcı epilasyon, kıl tipi ve ağrısız işlem.

## Teknik özellik

Profesyonel safir başlık ve iletken soğutma ile tüm ciltlerde acısız epilasyon Diode Lazer kalitesi ile uzun ömür.  
3 dalga boyu.  
2 yıl sınırsız atış garantili.  
13 inç dokunmatik ekran.(Özel yazılım)  
Cinsiyet belirleme.  
TECH soğutma sistemi.(Ağrısız işlem)  
Cilt tipi seçme, kıl tipi seçme.  
İki Tedavi Modu: HR (Apilasyon);  
SR(Cilt Gençleştirme)

## AKSESUARLAR / BUZ BAŞLIK

Tenle temas eden Buz başlık yüksek soğutma sistemi sayesinde karlanarak, 1 – 3 mm kalınlığındaki Epidermisi hızla soğutup acı hissini ortadan kaldırır.

Güvenli, Etkili ve Ağrısız.



İlk Seansta %85 Sonuc Garantisi! Yanma Riski Yok...

Yeni nesil teknolojiye sahip DIODE LASER saphire soğutma sistemi buz başlığı ile ağrısız, acısız konforlu uygulanma imkanı sağlar. Etkin micro işlemcisi ile yüksek dozlarda soğut-

ma gücünü artırarak konforlu epilasyon imkanı sağlar. Safir Başlık ışığın odaklanarak kıl folikülüne saf biçimde kırılmadan gitmesini sağlar . Bu sayede seans sayıları azalır ve memnuniyet artar.

# DIODE LASER



# DIODE LASER 600WATT

## UYGULAMA

808nm diyot lazer, epidermisi soğutmak ve korumak için safir bir kafa kullanır, bu da epilasyon işlemini ağrısız ve rahat hale getirir.

## Teknik özellik

Lazer cihazı tipi - Diyot lazer- 3 Dalga boyu  
Kaynak maniple emitörü - 20 milyon flaş  
Darbe süresi - 30-100 ms  
Darbe genişliği - 140 ms  
Toplam atım sayısı -1-10 Hz  
Radyasyon dalga boyu - 808 nm  
Başlık gücü - 600 W  
En yüksek güç tüketimi - 1500 W  
Çalışma noktası (boyutlar) - 13x13 mm  
Enerji yoğunluğu - 6-120 J/V. cm  
Uç malzemesi - Doğal safir  
Soğutma sıcaklığı -10 °C  
Lazer soğutma sistemi - Yarı iletken + hava + su





# BLACK LIGHTNING BUZ BAŐLIK ÜTÜLEME IPL OPT-SHR

## UYGULAMA

1 Saniyede 10 atıő yapabilme özelliđi ile acısız süper ütüleme lazer epilasyon yapma fırsatı sunan eşsiz bir cihaz. Cilt bakım merkezlerinde en çok tercih edilen en iyi lazer epilasyon aletlerindedir.

## Teknik özellik

Dalga Boyu: 640-1200nm

IPL Enerji: 1-50 Joule

Başlık: 1 \* IPL/SHR-HR

Spot Boyutu: 10x40 nm

SHR (Sn.Atıő Ad.): 1-10 HZ

Ekran: 10\* İnch Renkli Dokunmatik Ekran

Sođutma Sistemi: CHILLTIP KONTAKT,SAPHIRE CRISTAL

Uygulama Mod: HR/SHR/OPT.

Ebatlar: 40x45x105 cm Ađırlık: 42 kg



# İĞNELİ EPİLASYON CİHAZI


## UYGULAMA

Dünya üzerinde 150 yıldır kullanılan iğneli lazer epilasyon makinesi en etkili ve % 100 kesin sonuç veren, istenmeyen tüylerin kökünü kurutan en garantili epilasyon sistemidir.

## Teknik özellik

Dijital zaman ayarı  
Vuruş süresini ve sayısını ayarlayabileceğimiz dijital ekran  
Manuel ve otomatik pedal kullanım seçeneği  
Flash ve Termoliz seçeneklerinde Blend çıkışı  
otomatik olarak ayarlar  
Pedala basıldığında sesli uyarı sistemi  
Çalışma sesini kapatıp açabilme imkanı  
Voltaj : 220V  
Frekans : 50-60 Hz  
Amper : 1A  
Power : 50W  
Çıkış Frekans : 1.3 Mh

İSTENMEYEN TÜYLERE  
KESİN ÇÖZÜM

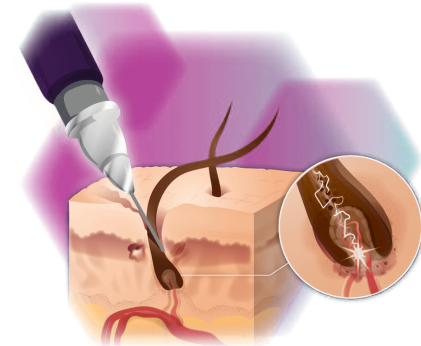



# ALEX PREMIUM PLUS LAZER EPİLASYON CİHAZI

## UYGULAMA

İstenmeyen tüylerde kısa sürede maksimum sonuç alabilirsiniz.  
Çift Başlıklı epilasyon cihazı.

## Teknik özellik

DALGA BOYU:640-950 NM  
IPL ENERJİ :1-50 JOULE  
BAŞLIK:Hr-OPT  
SPOT BOYUTU:50X40X15  
Hr SANİYEDE ATIŞ :2-3Hz  
10.4 İNC RENKLİ DOKUNMATİK EKTRAN  
ECOVAT SOĞUTMA SİSTEMİ -15 DERECE  
UYGULAMA MOD: Hr-OPT  
EBAT: 75X95X45  
AĞIRLIK:70 KG.



## ALEX PREMIUM LAZER CİHAZI HAVA ÜFLEMELİ OPT-SHR

### UYGULAMA

1 Saniyede 3 atış yapabilme özelliği

OPT-HR Epilasyon: İstenmeyen tüylerde kısa sürede maksimum sonuç alabilirsiniz.

### Teknik özellik

Dalga Boyu: 640-950nm

IPL Enerji: 1-50 Joule

Başlık: 1 \* IPL/OPT-HR

Spot Boyutu: 15x40x50 mm

OPT (Sn.Atış Ad.): 1-3 HZ

Ekran: 10\* İnch Renkli Dokunmatik Ekran

Soğutma Sistemi: CHILLTIP KONTAKT,

SAPPHIRE CRISTAL

Uygulama Mod: HR/SHR/OPT.

Ebatlar: 40x45x105 cm

Ağırlık: 42 kg

HAVA ÜFLEME  
TEKNOLOJİ  
İLE AĞRISIZ, ACISIZ  
EPİLASYON





# MEZOTERAPİ CİHAZLARI



# İĞNELİ MEZOTERAPİ CİHAZI



**CİLT GENÇLEŞTİRME,**  
**KIRIŞIKLIK GİDERME**  
**PİGMENTASYON KALDIRMA**

## UYGULAMA

Mezoterapi dünya genelinde cilt yenileme, anti-aging, bölgesel zayıflama, selülit, çatlaklar, lekeler, yara izleri, saç tedavisi, akut ve kronik ağrı, spor yaralanmaları, çeşitli deri hastalıklarının tedavisinde kullanılır.

## Teknik özellik

Enjeksiyon sistemi

Güç: dahili pil, lityum polimer pil

(7.4V, 850mAh ) Şarj cihazı: Giriş adaptörü:  
110 ~ 240V 50 / 60Hz Çıkış: DC 8.4V 500mA  
Maks.

Süre: 2.000 kata kadar negatif basınç

Güç Tüketimi: 4W

Malzeme: ABS (Ana Makine, Negatif Basınç  
Kolu, Şarj Tabanı), PC (Şırınga Tutucu,  
Filtre),

Nikel Kaplama (Şırınga Pistonu), Silikon Tüp  
(Negatif Basınç Tüpü)

Ağırlık : 220 Gr.

# İĞNESİZ MEZOTERAPİ CİHAZI

## UYGULAMA

İğnesiz mezoterapi ultrason, iyontofrez ve mezo-elektroporasyon gibi transdermal sistemler vasıtasıyla deri içine ilaç aktarılmasıdır. Bu sistemlerle, deri içine aktarılan spesifik kokteyller vasıtasıyla arzu edilen bir etkinin elde edilmesi beklenir. Kozmetikte, iğnesiz mezoterapi başarıyla anti-aging, lokal yağ (lipoliz) ve selülitte karşı mücadelede uygulanır.

## Teknik özellik

Gövde-Aksan: Plastik proplar metal  
Akım enerjisi: (9 kademe)  
Kullanım: Kablosuz 220w





# HIFU TERAPİ CİHAZLARI





# 2D HIFU CİLT SIKILAŞTIRMA

## UYGULAMA

2D Hifu ,cilt gençleştirme alanında dünyanın en yeni ve en güçlü teknolojilerinden biridir. Hipo yüz cihazı, yanak, çene ve boyun derisinin yeni kolajen yapılması, yüz cildinin gençleştirilmesi ve gerilmesi, yüz çizgilerinin ve kırışıklıklarının azaltılması, kırışıklıkların azaltılması sonucunda cildin esnekliğini ve berraklığını güçlendirmek ve arttırmak için kullanılır.

## Teknik özellik

Ayarlanabilir enerji: For 1.5mm cartridge: 0.1 2J, for 3mm cartridge: 0.1- 2J , For 4.5mm cartridge: 0.1 - 2J

Kartuşlar: 1.5mm 3mm 4.5mm

Elektrik güvenlik sınıfı: I

Noktalar arasındaki mesafe: 1-2 mm

İşlevsel parça türü: BF

Sıvıların girişine karşı koruma derecesi: IPX1

Ağırlık: 6.5Kg

**CİLT GENÇLEŞTİRME ALANINDAKİ  
EN YENİ VE EN GÜÇLÜ  
TEKNOLOJİLERDEN BİRİ**



ÇENE SARKMASI  
GIDI SARKMASI  
YANAK SARKMASI  
ALIN ÇİZGİLERİ  
BOYUN SARKMASI

## HIFU 3D VÜCUT ZAYIFLAMA CİHAZI

### UYGULAMA

Yüksek Yoğunluklu Odaklanmış Ultrason (HIFU), cildin kolajenini canlandırabilecek ve yenileyebilen ve dolayısıyla dokuyu iyileştiren ve cildin sarkmasını azaltabilecek şekilde cilt ve deri altı dokusuna ısı enerjisi sağlar. Kelimenin tam anlamıyla, herhangi bir invaziv cerrahi veya enjeksiyon olmadan gerçekleştirilen bir işlemdir.

### Teknik özellik

Teknoloji: Odaklanmış Ultrasonik Ses Dalgası  
Başlık Başlık: 5 Farklı Başlık Boyutu  
Ekran: 15 inc Ultra HD Dokunmatik Ekran  
Voltaj: 220V  
Dil: Çoklu Dil Seçeneği



# ULTRASON HIFU 7D VÜCUT ZAYIFLAMA MAKİNESİ

## UYGULAMA

Kollajen rejenerasyonu için optimum sıcaklığa ulaşan, kollajen rejenerasyonu mekanizmasını uyarmak, böylece cildin derinin altından esnekliğini arttırmak için, kollajen rejenerasyonu için optimum sıcaklığa ulaşan yüksek yoğunluklu odaklı ultrason kullanır.

## Teknik özellik

Birden fazla katmana ultrason dalgaları  
65 ~ 75 ° C'lik stabilize sıcaklıkların aktarılması  
Teknoloji: Yüksek Yoğunluklu Odaklanmış Ultrason  
Tedavi alanı: Yüz, göğüs, kol, göbük, uyluk, kalça, bacak  
7 Kartuş  
1,5MM,2,0MM,3,0MM,4,5MM,6MM,9MM,13MM  
Enerji tipi :HIFU 4Mhz/7Mhz  
OEM: EVET  
İşlev :Kırışıklık giderme, yüz germe, vücut zayıflama



**TOPARLAR**  
**SIKILAŞTIRIR**  
**ŞEKİLLENDİRİR**



# CİLT BAKIM CİHAZLARI



# HYDRAFACIAL 6+1

## 1)HYDRADERMABRAZYON

Serum yardımı ile cilt temizliği yapılır. Cilt ve -  
kum yöntemi ile aknelere arındırılır .

## 2)MICRO RF

Cilt yüzeyini toparlamak için yapılan işlemdir .

## 3)SOĞUTUCU BAŞLIK

Cildi beyazlatır ve yeniler,gözenekleri küçültür  
ve duyarlılığı azaltır.

## 4)FACE LIFTING

Lifting etkisi ile cildin gerilmesine yardımcı olur.

## 5)SPREYTABANCASI

Cildin nem miktarını artırarak daha parlak bir  
ciltde kavuşmanızı sağlar.

## 6)SCRUBBER

Vermiş olduğu titreşim ile cildi ölü tabakalar-  
dan arındırır.

## UYGULAMA

Cilt üzerinde oluşan olumsuz tabakalardan Amerikan Cilt Bakım  
Tekniği ile cildi temizleme işlemi.

**HYDRADERMABRAZYON TEKNOLOJİSİ**  
**HYDRAFACIAL İLE**  
**DAHA GENÇ BİR CİLT**



# Q-SWITCHED ND YAG KARBON PEELİNG CİHAZI

## UYGULAMA

GÜÇLÜ KIZIL ÖTESİ ENERJİSİ İLE DÖVME SİLME, CİLT GENÇLEŞTİRME, KARBON PEELİNG, GÖZENEK SIKILAŞTIRMA, AKNE VE SKARLARI, PİGMENTE LEZYONLAR, BENLER, MELAZMA, ÇİL, GÜNEŞ VE YAŞLILIK LEKELERİ İÇİN MÜKEMMLE SONUÇ.

## Teknik özellik

ENERJİ : 2000MJ  
DALGA BOYU: 532-10604NM  
PULSE SÜRESİ: 5-12 NS  
SPOT ALANI 1-7 MM  
TEKRALAMA ORANI :1-15Hz  
AĞIRLIK: 60KG  
KONTROL PANELİ: 10.4 İNC  
TFT DOKUNMATİK LCD  
EKRAN



LAZERLE CİLT GENÇLEŞTİRME,  
KARBON PEELİNG  
AKTİF SİVİLCE VE  
AKNELERİN TEDAVİSİ





# ND-YAG Q SWITCH DÖVME SİLME CİHAZI

## UYGULAMA

Cilt bakımı konusunda önemli bir yere sahip olan dövme silme sildirme işlemi için en etkili makinadır. Bu cihaz ile müşterilerinizin lazerle dövme sildirme istekleri için en etkili sonuca varabilirsiniz.

## Teknik özellik

1064nm, 532nm, 1320nm dalga boylarında  
3 farklı başlık merceği.

Atım Uzunluğu:  $\leq 10$  ns

Frekans: 1-15hz

Max enerji: 400mj-1000mj

Voltaj: AC 110V/220 ;50/60Hz

Ekran: 10.2 inch dokunmatik renkli ekran

Soğutma Sistemi: Su ve hava soğutma

Ağırlık: 45kg

Ebatlar: 119x54x53cm



# QSWICH ND YAG CİHAZI

## UYGULAMA

GÜÇLÜ KIZIL ÖTESİ ENERJİSİ İLE DÖVME SİLME, CİLT GENÇLEŞTİRME, KARBON PEELİNG, GÖZENEK SIKILAŞTIRMA, AKNE VE SKARLARI, PİGMENTE LEZYONLAR, BENLER, MELAZMA, ÇİL, GÜNEŞ VE YAŞLILIK LEKELERİ İÇİN MÜKEMMLE SONUÇ.

## Teknik özellik

ENERJİ : 2000MJ  
DALGA BOYU: 532-10604NM  
PULSE SÜRESİ: 5-12 NS  
SPOT ALANI 1-7 MM  
TEKRALAMA ORANI :1-15Hz  
AĞIRLIK: 60KG  
KONTROL PANELİ: 10.4 İNC  
TFT DOKUNMATİK LCD  
EKRAN





## 9+1 KLASİK CİLT BAKIM CİHAZI

Cildin derinliklerine kadar inerek yağları ve siyah noktaları temizler. Cildi Steril ederken aynı zamanda leke, sivilce ve akneleri yok eder. Kırışıkları açar ve liftleri kaldırarak cildi toplar göz çevresindeki torba ve kırışıklıkları giderir.



- Ozon
- Buhar
- Işıklı Büyüteç
- Yüksek Frekans
- Galvanik
- Vakum
- Sprey
- Cilt Analiz
- Frimatör
- Lifting

**CİLT TEMİZLEME**  
**CİLT YENİLEME**  
**SİYAH NOKTA TEMİZLEME**

## 14+1 KLASİK CİLT BAKIM CİHAZI

Güzellik merkezlerinde tercih edilen 14+1 Fonksiyonlu Cilt Bakım Cihazı, güneş ışınlarından zarar görmüş cildin gençleştirilmesi(yüz, boyun, omuzlar, sırt, kollar ve bacaklar), güneş lekeleri tedavisi, yaşlılık lekelerinin tedavisi, lekeli cilt sorunlarının minimize edilmesi, akne(sivilce izleri) ve yara izlerinin azaltılması, siyah noktaların ve gözeneklerin temizlenmesi, yağlı cildin temizlenmesi vb. olarak birçok cilt temizleme ve cilt yenileme işlevini görmektedir.

- Ozon
- Yüksek Frekans (HF)
- Frimatör – Brush (Fırça)
- Ultrasonic Ses Dalgası ile Ürün Yedirme İşlemi İyonto Ferez (Galvanik Akım)
- Lifting (Kaz Ayakları ve Kırışıklık Giderme)
- Vakum
- Sprey
- Loop Işıklı Büyüteçli Lamba
- Wood Lamp: (Cilt tipinin ve cilt hastalıklarının tanımlanmasını sağlar.)
- Soğuk Sıcak Masaj Yapan Çekiç Kompres
- Elmas Uç ile Peeling – Diamond Micro Dermabrazyon



# ASK TATTO KALICI MAKYAJ MAKİNESİ

## UYGULAMA

Kalıcı makyaj uygulamalarında,Deep Liner,eyeliner,  
Dudak renklendirme,Kıl tekniği,Pudralama uygulamalarında  
kullanabileceğiniz profesyonel kullanıma uygun bir cihazdır.

## Teknik özellik

ERGONOMİK TASARIM  
RAHAT TUTUŞ ÖZELLİĞİ SUNAN KALEM  
MİNİMUM TİTREŞİM  
DOKUNMATİK KONTROL  
NANO İĞNE SEÇENEĞİ  
AKILLI OTOMATİK START VE STOP  
ALMAN MOTOR  
DEVİR / DAKİKA  
HIZLI ŞARJ ÖZELLİĞİ (220 V veya USB)



**PROFESYONEL**  
**KALICI MAKYAJ CİHAZI**

# 9+1 HYDRAFACIAL CİLT BAKIM CİHAZI



## UYGULAMA

Hydrafacial Cilt Bakım Cihazı; Cildimiz her gün uzun süre çevreye maruz kaldığında kirlenir, kurur, beslenemez hale gelir. Yaşlandıkça, çoğu orta yaşlı kadın da cilt gevşemesi ve donukluğu problemleri ile uğraşmak zorunda kalır.

## Teknik özellik

Hydro ve Elmas Dermabrazyon (Vakum) Başlığı  
Foto Terapi Başlığı  
Bio Lifting (Yüzgerme) Başlık  
Jet Oksijen Enjeksiyon Başlığı  
3 Vakum Pen Temizleme Başlığı

HYDRAFACIAL  
CİLT SIKILAŞTIRMA İÇİN  
EN İYİSİ





# BUHAR OZON VAPOZON CİHAZI



## UYGULAMA

Cilt bakım cihazları arasında kolay kullanımı ile g zellik merkezlerinin sıklıkla tercih etmiř olduėu Ayaklı Buhar Makinesi Ozon Vapozon Cihazı; siyah nokta vakumu ve buharlı vakumu sayesinde cildi yumuřatarak temizleme  zelliėine sahip en iyi buharlı ve vakumlu y z temizleme aletidir.Yoėun buharı sayesinde ciltteki g zenekleri aarak cildin bakıma hazır hale gelmesini saėlar.Baėımsız ozon  zelliėi ile suyu ve uygulandıėı b lgeyi dezenfekte eder.

## Teknik  zellik

Buhar b l m ne ayrı ama kapama d ėmeli  
Ozon b l m ne ayrı ama kapama iin  
komut anahtarlı  
Geniř su hazneli  
Yıldız 5 ayaklı tekerlekli sistem.  
Kaliteli Uzun  m rl  ve Dayanıklı.

SIVİLCE, AKNE, CİLT LEKELERİ  
VE İZLERİ GİDERMEDE  
FAYDALI SONULAR

# ÇATLAK VAKUM CİHAZI

## UYGULAMA

Çatlak görünümünde düzelleme sağlarken cildin sıkılaşmasına da yardımcı olur. Cilt altına derinlemesine nüfuz eden ısı ile kolajen ve elastini aktive eder. Bu sayede, cildi daha sıkı ve pürüzsüz bir görünüme kavuşturur.

## Teknik özellik

Vakum Gücü: 100 Kpa  
Garanti: 2 Yıl  
Sertifika: CE Belgeli



GÖĞÜS POPO BÜYÜTME  
VAKUM MASAJI  
SELÜLİT MASAJI  
GIDI TOPARLAMA  
ÇATLAK ONARIM





GÖZ KAPAĞI,  
GÖZ ALTI VE  
GÖZ ÇEVRESİ  
GENÇLEŞTİRME

## PLAZMA PEN

### UYGULAMA

Plazma Pen, lazer ve benzeri cihazların kullanımının zor ya da tehlikeli olduğu durumlarda, güvenle kullanabilmek için geliştirilmiştir. Uygulama öncesi bir ön hazırlık gerektirmez ve anestezi kremi ile uygulanabilir.

### Teknik özellik

Nokta ve çil üzerinde en alt seviyede kullanma imkanı.

Dövme işlemlerinde yüksek güç.

Paslanmaz çelik spot kalem güvenlidir

Lcd ekran elektrik ve yoğunluk seviyelerini gösterir.

Doğrudan usb ile şarj edilebilir, kolay taşıma ve kolay kullanım.

Yüksek kapasiteli pil.



STERİLİZASYON İÇİN  
UV IŞINLARI ÜRETİR,  
YARALARIN İYİLEŞMESİNE  
YARDIMCI OLUR



## YÜKSEK FREKANSLI CİLT BAKIM CİHAZI

### UYGULAMA

Bu cihaza 'Yüksek Frekanslı Elektro Terapi Yüz Cilt Bakım Cihazı' da denmektedir ve önemli bir güzellik enstrümanıdır. Yüksek frekanslı akım üretilerek cam elektrot tüpünden geçer ve cilde uygulanır. Böylece etkin tedavi gerçekleşmiş olur.

### Teknik özellik

4 başlıklı

**Kaşık Başlıklı Prop:** Özellikle hassas ciltlerin daha dirençli, güçlü olmasını sağlar.

**Çubuk Başlıklı Prop:** Antibakteriyel etkiye sahiptir

**Tarak Başlıklı Prop:** Saç derisinde kullanılır

**Mantar Başlıklı Prop:** Cilde uygulanacak maddelerin cildin orta tabakası olan dermise ulaştırılmasını sağlar.

**4**  
BAŞLIK



# U-LED TERAPİ CİHAZI

## UYGULAMA

Led maske, cildin yeni ve pürüzsüz görünmesi için uygulanan bir anti-aging uygulamasıdır.

## Teknik özellik

Cilt gençleştirmeye yardımcı  
İnce çizgileri azaltmaya yardımcı  
Siyah lekelerin çıkarılmasına yardımcı  
Cilt esnekliğini artırmaya yardımcı  
Küçülen gözeneklerin genişletilmesine yardımcı  
Cildi derinden temizlemeye yardımcı

SOLGUN VE  
MATLAŞMIŞ CİLDİ AYDINLATIR.  
ANTI-AGING ETKİSİ YARATIR.

7 RENG  
ETKİ



## DR.PEN

Dr.pen A6 hem şarjlı hem de kablolu olarak çalışabilen, hem tedavi hem de kalıcı makyaj uygulamalarında kullanıma uygun doktorlar ve klinikler için tasarlanmış mikro iğneleme cihazıdır.

İğneler titanyum olup, cilt kullanımına uygundur.

## METAL ETAJER

Takılıp çıkarılabilir tekerleğe sahip, çekmeceli-çekmecesiz, cihaz ve aparatların yerleştirilebildiği, taşınabilir, kullanışlı metal dolaptır.



9pin

12pin

36pin

42pin

Nano-A

Nano-B



# AYAKLI BÜYÜTEÇ (LOOP)

## Teknik özellik

360 derece akropabat sistemine sahip ayaklı loop  
Led aydınlatma ile yüksek ısı problemi yaratmaz  
90 Ledli  
Kolay hareket ettirilebilir ışıklı büyüteç  
5 kademeli ışık ayarlıdır.  
Şık tasarımı,  
Devrilmez ayaklar







**LPW**

**GÜZELLİK EKİPMANLARI**

[www.laserproworld.com](http://www.laserproworld.com)